



Masážne kreslo A60



Ďakujeme za zakúpenie produktu. Prosím pozorne si prečítajte návod, aby ste vedeli narábať s kreslom správne pred jeho použitím. Prosím venujte viac pozornosti dôležitým bezpečnostným upozorneniam a riadne si uschovajte tento návod pre budúce použitie. Poznámka: Naša spoločnosť si vyhradzuje právo revidovať nákras a popis produktu bez hocijakých ďalších upozornení. Vztahuje sa na prevedenie produktu.

OBSAH

Bezpečnosť a poučenie

Popis funkcii a komponentov

Funkcie

Spôsob používania

Špecifikácie produktu

1. Dôležité bezpečnostné upozornenie



- Nenéchajte deťom chytať pohyblivé časti produktu
- Používajte dobré uzemnenie napájania vhodné pre tento produkt.
- Prosím vypnite od zásuvky po použití alebo pred čistením, vyhnite sa zraneniu alebo poškodeniu produktu.
- Prosím obsluhujte produkt podľa inštrukcii v tomto návode.
- Nepoužívajte doplnky, ktoré nie sú priložené/ doporučené.
- Nepoužívajte produkt vonku/ v exteriéri.
- Prosím dôkladne si prečítajte manuál pred použitím.
- Iné využitie ako je uvedené v manuály je zakázané.
- 15 minút denne je odporúčaný čas pre 1 osobu
- Nepoužívajte ak je koža deravá alebo veľmi poškodená.
- Nepoužívajte ak je poškodený plastový kryt alebo kabeláž.
- Nepoužívajte ak je vetrací otvorí zakrytý alebo neprechodný.
- Nevhadzujte nič do vnútra zariadenia.
- Nikdy nezaspiť počas používania zariadenia
- Nepoužívajte ak ste kontumovali alkohol alebo ak je Vám nevoľno.
- Nepoužívajte minimálne hodinu po jedle.
- Nepoužívajte masáž príliš silno aby ste si neprivodili zranenie

2. Prostredie pre použitie

- Nepoužívajte produkt pod veľkou teplotou a vo vlhkom prostredí ako je napríklad kúpeľňa a podobne.
- Nepoužívajte kreslo pri náhlých teplotných zmenách, vždy počkajte pred zapnutím na ustálenie teploty.
- Nepoužívajte v prašnom, leptavom alebo vlhkom prostredí.
- Nepoužívajte produkt kde nie je dostatok miesta a kde je zlé vetranie

3. Ľudia, ktorý nie sú vhodný na používanie tohto produktu.

- Ľudia trpiaci osteoporózou nie sú vhodný na používanie produktu.
- Ľudia trpiaci srdcovými poruchami alebo nosia elektronické lekárske zariadenie ako napríklad srdcový kardiostimulátor nie sú vhodný na používanie produktu
- Ľudia so zvýšenou teplotou (horúčkou) nie sú vhodný na používanie produktu.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu nie sú vhodné na používanie tohto produktu.
- Zranené osoby a ľudia s kožnými ochoreniami nie sú vhodný na používanie kresla.
- Deťom mladším ako 14 rokov alebo ľuďom s mentálnym postihnutím bez dozoru nie je umožnené používať produkt.
- Ľuďom, ktorým bolo povedané doktorom, že majú odpočívať alebo ľudia čo sa cítia chorí nie sú vhodní na používanie produktu.
- S mokrym telom je vstup na produkt zakázaný.

4. Bezpečnosť.

- Preverte či napätie vyhovuje špecifikácii tohto produktu.

- Voda sa nesmie dostať do vnútra produktu aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom a poškodeniu zariadenia.
- Nepoškodte elektrické vodiče, nemeňte obvody tohto produktu.
- Nepoužívajte mokrá látku na čistenie elektrických častí (prepínač, zásuvka).
- Buďte mimo produktu v prípade výpadku elektrického prúdu, vyvarujete sa zraneniu ak prúd znova naskočí.
- Prestaňte používať produkt ak sa správa neprírodzene a okamžite kontaktujte svojho predajcu.
- Prestaňte používať produkt ak cítite nevoľnosť a konzultujte zdravotný stav s lekárom.
- Produkt nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, vedomou, mentálnou kapacitou alebo s nedostatkom skúseností a poznatkov, pokiaľ nemajú dozor alebo inštrukcie týkajúce sa používania produktu od zodpovednej osoby pre ich bezpečie pre bezpečnú obsluhu zariadenia.
- Deti by mali byť pod dozorom, ktorý zaistí aby sa nehrali a nezranili používaním produktu.
- Ak sú káble vodičov poškodené, musí byť produkt vrátený na miesto výroby, je to servisná služba, ktorú vykoná kvalifikovaná osoba, aby ste sa vyhli nebezpečeniu.


5. Údržba.

- Technická údržba produktu by mala byť vykonaná školenou, alebo predajcom poučenou osobou, používatelia majú zakázané rozoberať a spravovať produkt.
- Nezabudnite odpojiť zo zásuvky po používaní.
- Nepoužívajte produkt ak je poškodená zásuvka.
- Ak produkt nebude dlho používaný, prosím zabezpečte kabeláž a udržiavajte produkt v suchom a bezprašnom prostredí pri teplote minimálne 10°.
- Nenechávajte produkt pod veľkou teplotou, blízko ohňa a vyhnite sa dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Poškodené káble musia byť počas záručnej doby nahradené výrobcom (servisným technikom alebo kvalifikovanou poverenou osobou). Vyhnite sa nebezpečenstvu.
- Produkt čistíte suchou handričkou. Nepoužívajte nevhodné čističe (benzín, alkohol...)
- Mechanické súčiastky tohto produktu sú špeciálne navrhnuté a zostrojené, **nemeňte ich za iné.**
- Nepoužívajte predmety s ostrými hranami pri manipulácii s kreslom.
- Netlačte kreslo po nerovnom povrchu, produkt by mal byť nadvihnutý pred sťahovaním a posúvaním
- **Kreslo používajte striedavo, nepoužívajte nepretržite po dlhú dobu.**

6. Riešenie bežných porúch a problémov.

- Je prirodzené, že produkt vydáva pohybujúce sa zvuky pri používaní.
- Ak ovládač nepracuje správne, skontrolujte zástrčku a zásuvku či sú pevne pripojené a presvedčte sa že je prepínač zapnutý v polohe 1 (on).
- Ak produkt dopracuje, automaticky sa vypne; ak produkt pracuje nepretržite po dlhú dobu, teplotná ochrana dá produkt automaticky do vypnutého režimu a kreslo by malo byť použiteľné opäť za 30 minút.


Názvy a funkcie komponentov

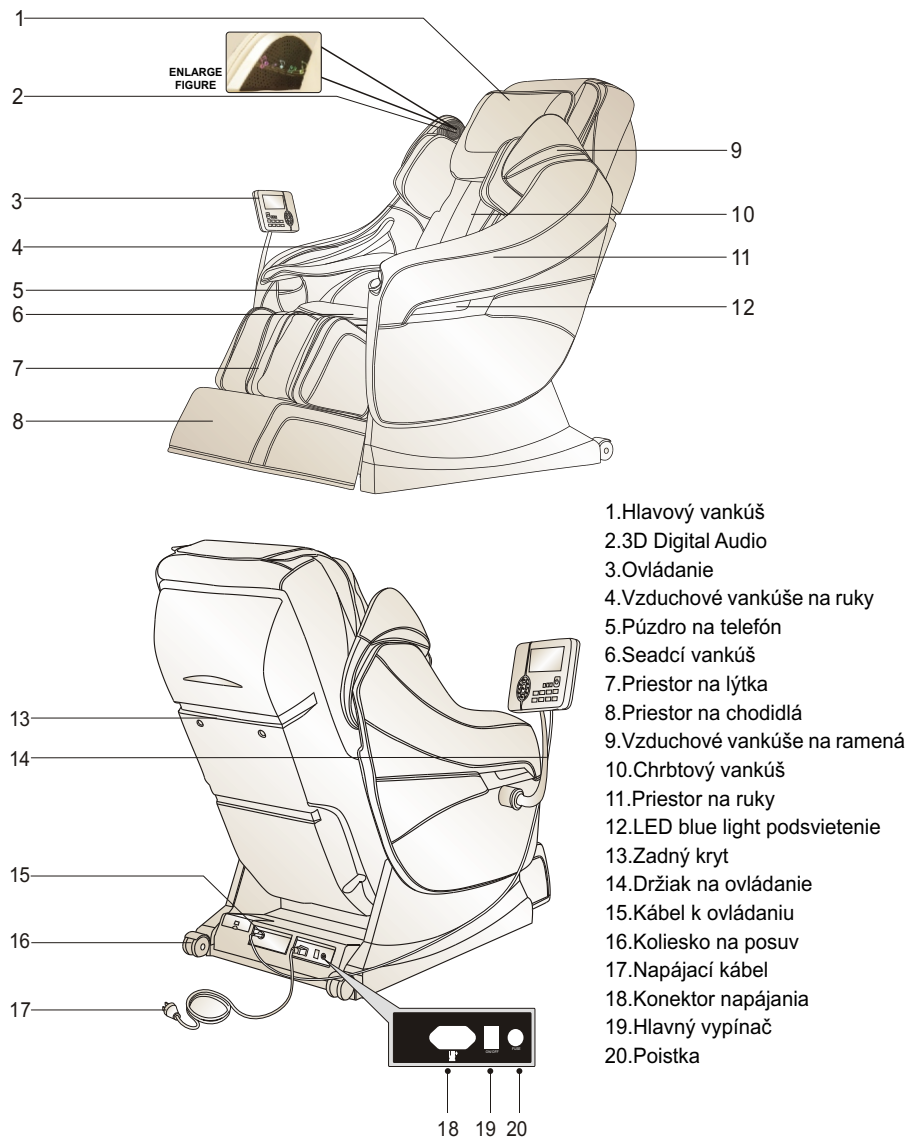

Funkcie

- Tento produkt ponúka sadu inteligentných 3D mechanických rúk, ktoré sa hýbu hore a dole, vysúvajú dopredu a dozadu a majú 4 riadené masážne kolieska.
- Ramenná časť je navrhnutá s automatickou detekciou a s funkciou doladenia pozície; krivky tela a masážne body sa detekujú automaticky a nastavujú rozostupy a úroveň masážnych hlavíc pohybom vpred a vzad v závislosti na zistenej krivke tela a masážnych bodov, tak, aby bola masáž čo najviac prirodzená a účinná.
- Pohodlná, jednoduchá, odstraňujúca bolesť, tlaková, krútenie pásu a iné špecifické masážne funkcie ponúka toto kreslo.
- Sada s tromi druhmi pamäťových masážnych funkcií
- Manuálne nastavenie masáže chrbta v troch možnostiach: celková, čiastočná a zafixovaná pozícia; 6 masážnych metód na chrbte: stláčanie, hnetanie, tapping, shiatsu, hnetanie a klepanie a 3 D; 5 úrovni rýchlosti masáže; pri masáži tapping a shiatsu môžete nastaviť aj úroveň šírky - rozstup masážnych hlavíc nastaviteľný v 5 pozíciách
- Vzduchová masáž rúk (16 zabudovaných airbagov), vzduchová masáž ramien (4 zabudované airbagy), nastaviteľné 3 stupne intenzity
- Vzduchová masáž nôh a chrbta: vzduchová masáž na chrbte (4 zabudované airbagy), masáž sedacích svalov (5 vstavaných airbagov) tlaková masáž nôh (40 vstavaných airbagov), nastaviteľné 3 stupne intenzity.
- Funkcia prehrávania MP3 z telefónu, vstavané 3 D digital audio pri ramenách
- Infra vyhrievanie chrbta, pomocou uhlíkových vlákien
- Infra vyhrievanie kolien, pomocou uhlíkových vlákien
- Vysúvacie ukončenie na chodidlá sa prispôsobí výške osoby
- Naklápanie podnožky, sklápanie chrbtovej opierky
- Funkcia Auto-nastavenie, masážne ruky sa automaticky vrátia do pôvodnej polohy po vypnutí prístroja.
- VFD displej
- Efektívne LED podsvietenie - modré
- bezdrôtové Bluetooth prehrávanie
- Pomocou pripojenia Bluetooth je možné aplikáciou ovládať masážne kreslo musí to podporovať systém

VFD farebné zobrazenie na ovládaní

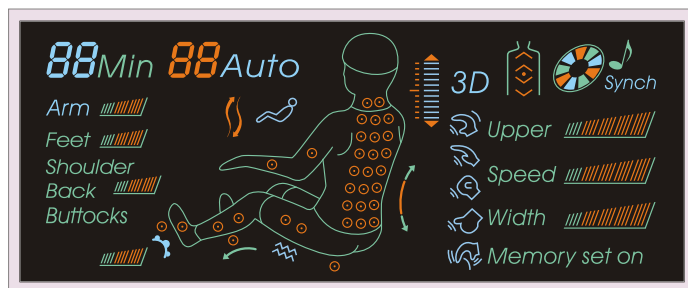

Poznámka: toto zobrazenie je len na referenčné účely



Prípojenie napájania



• Zobrazenie pripojenia




• Zobrazenie pozícií pripojenia a vypínača

Spustenie masáže

- 1). Stlačte červené tlačidlo Power pre spustenie masáže, masážne kreslo sa automaticky posunie do mierne ležatej polohy..
- 2). Kreslo automaticky detekuje pozíciu ramien a masážnych bodov, čakajte prosím, pokiaľ sa detekcia ukončí.
- 3). Po ukončení zaznie signál [di di di...]. Teraz si môžete upraviť pozíciu ramien pomocou tlačidiel hore a dole. Ak počas 10 sekúnd neupravíte manuálne pozíciu ramien, spustí sa automatická masáž. Rovnako môžete spustiť masáž stlačením tlačidla s masážnym programom, čím preskočíte krok automatickej detekcie ramien.

Tlačidlá	Popis	Displej
POZÍCIA RAMEN (tlačidlo HORE)	Posúva masážne hlavice smerom hore	
POZÍCIA RAMEN (tlačidlo DOLE)	Posúva masážne hlavice smerom dole	

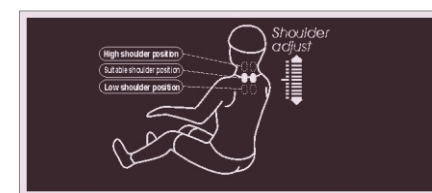

- 4). Vyberte si druh masáže
 - Pamäťová masáž
 - Počas masáže môžete kedykoľvek použiť tlačidlo A, B, C, stlačte jedno z nich pre vyvolanie uloženého masážneho programu.

A B C Vlastné masážne programy

• Nastavenie času

Tlačidlo	Popis
TIME	Nastavený čas je 20 minút. Maximálny čas je 40 minút. Po každom stlačení tlačidla sa prirata 5 minút k času až po maximálnu hodnotu 40 minút. Posun času funguje v cykle. .

• Automatické masáže

Tlačidlo	Popis	Displej
FINE	Komfortná masáž: uvoľňuje svaly a kĺby	F1 Auto
RELAX	Lahká masáž: podporuje krvný obeh	F2 Auto
STIFFNESS	Hĺbková masáž na uvoľnenie od bolesti	F3 Auto
AIR PRESSURE	Tlak vzduchu na celé telo: pás, zadok, paže, nohy. Masáž pracuje súčasne.	F4 Auto
WAIST STRETCH	Strečing v páse: Vzduchové vankúše stláčajú a pridržajú telo, popri tom sa sklápa chrbtová opierka hore/dole a súčasne sa naklápajú aj nohy, čím dochádza k natiahnutiu svalov. Medzitým funguje vzduchová masáž aj masážne hlavice.	F5 Auto

• Manual functions

Tlačidlo	Popis	Displej
SHOULDER	Ramená: Automaticky nastaví na masáž ramien, nastaviteľná sila a rýchlosť	(H1)
Kneading&Taping	Hnetanie a klepanie: nastaviteľná sila a rýchlosť	(H1)
KNEAD	Hnetanie:nastaviteľná sila a rýchlosť	(H1)
Flap	Klepanie: 2 režimy nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť	(H1-H2)
SHIATSU	Shiatsu: 2 režimy, nastaviteľná sila, šírka a rýchlosť	(H1-H2)
3D	3D: 4 režimy, nastaviteľná sila a rýchlosť	3D (H1-H4)
SPEED	Rýchlosť: nastavenie v 5 stupňoch	Speed
WIDTH	Šírka: 5 stupňov nastavenia (režim klepanie a hnetanie)	Width

Tlačidlo	Popis	Displej
BACK STRETCH	Fixná pozícia (jeden bod)	
BACK STRETCH	Malý úsek (čiastočná masáž)	
BACK STRETCH	Celý chrbát (celková masáž)	
LOWER ADJUST	Pozícia masáže sa dá prispôbiť hore/dole (pri fixnej a čiastočnej masáži)	Masážne hlavice idú dole
UPPER ADJUST	Pozícia masáže sa dá prispôbiť hore/dole (pri fixnej a čiastočnej masáži)	Masážne hlavice idú hore

Poznámka: okrem masáže ramien - shoulder grasp

• Vzduchová masáž

Tlačidlo	Popis	Displej
ARM	Zapnúť/vypnúť vankúše na ruky	Arm
INTENSITY	Nastavenie tlaku vankúšov rúk - 3 stupne	Arm
LOWER BODY	Vankúše pre spodnú časť tela - 3 možnosti nastavenia: nohy, boky a pás	Feet Back buttocks
INTENSITY	Nastavenie tlaku vankúšov rúk - 3 stupne	
ARTHROSIS TRACTION	Pretiahnutie lýtok: funkcia aktívna v režime vzduchovej masáže spodnej polovice tela a masáže lýtok	

• Other manual function

Tlačidlá	Popis	Displej
	Zníži intenzitu sily masáže chrbta.	Upper 
	Zvýši intenzitu sily masáže chrbta.	Upper 
	Masážne valčeky, 3 stupne nastavenia	
	Vyhrievanie v oblasti chrbta a kolien, pocit tepla sa dostaví cca po 3 minútach od zapnutia	

• Uhol sklonu chrbta a nôh

Tlačidlá	Popis	Displej
	Automatické polohovanie: 3 automatické polohy, po zatlačení tlačidla kreslo zmení sklon	(01 ~ 03) Auto
	Zdvíhanie nôh smerom hore: pri stlačení sa nohy pomaly dvíhajú, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.	
	Klesanie nôh smerom dore: pri stlačení nohy pomaly klesajú, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.	
	Pohyb opierky smerom hore: pri stlačení sa opierka pomaly dvíha, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.	
	Pohyb opierky smerom dole: pri stlačení opierka pomaly klesá, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.	
	Pohyb do sedu: podržte tlačidlo a súčasne sa dvíha chrbát a klesajú nohy, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.	
	Pohyb do ľahu: podržte tlačidlo a súčasne klesá chrbát a dvíhajú sa nohy, pustením tlačidla sa pohyb zastaví.	

Vypnutie prístroja a ukončenie masáže

- 1). Pre zastavenie masáže, ukončenie všetkých masážnych funkcií a automatický návrat opôr chrbta a nôh do východiskovej polohy stlačte červené tlačidlo. Masážny režim sa tiež ukončí automaticky po uplynutí zvoleného času masáže. V tomto prípade sa nohy a chrbát nevrátia do pôvodnej pozície.
- 2). Po ukončení masáže alebo po vypnutí kresla sa na displeji zobrazí možnosť "Memory Set On" bliká a upozorňuje na možnosť uloženia posledných nastavení masáže a polohy kresla pod jeden z pamäťových programov A, B, C. Podľa potreby uložte posledné nastavenie kresla. Po opätovnom stlačení tlačidla POWER sa kreslo vypne a hlavice sa presunú do pôvodnej polohy (prípadne čakajte 10 sekúnd a kreslo sa vypne automaticky a presunie do pôvodnej polohy.



3). Vypnutie prístroja

- Hlavný vypínač v polohe OFF




3. Vypnutie a zastavenie masáže

- 1) Stlačte tlačidlo Power počas masáže, všetky masážne sa okamžite zastavia, chrbtová opierka a časť na nohy sa automaticky vrátia to pôvodnej polohy medzitým môžete nastaviť funkciu uložiť do pamäte. Po uplynutí času masáže sa všetky masáže ukončia, medzitým môžete uložiť režim do pamäte, ale chrbát a nohy sa po skončení nedajú do pôvodnej polohy.
- 2) Uloženie do pamäte: Po skončení alebo prerušení masáže ukazuje ovládanie na displeji "Memory" bliká a upozorňuje na možnosť uložiť aktuálne nastavenie masáže pred vypnutím, stačí ak stlačíte jedno z tlačidiel pre pamäť "M1" alebo "M2" ako chcete, čím uložíte mó do pamäte.

3) Vypnutie napájania zariadenia.

Zobrazenie (Vypnite hlavný vypínač napájania)

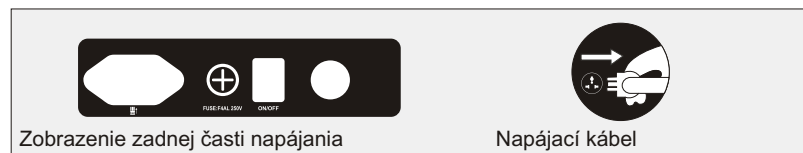


Bluetooth Prehrávanie hudby cez rozhranie Bluetooth

- Hudobný prehrávač s Bluetooth funkciou (ako mobilný telefón, tablet a pod.), po spárovaní na Bluetooth modul masážneho kresla je možné zabezpečiť prenos hudby do zabudovaného zvukového systému

Štandardné funkcie

- Prehrávanie hudby z mobilu: použitím vrečka na mobil na ľavej strane kresla, môže užívateľ pripojiť telefón s kreslom pomocou bluetooth a počúvať hudbu pri masáži.
- S dvoma zabudovanými 3D digital sound reproduktormi v ramenných opierkach si môžete spárovať mobil zo zvukovým systémom tak, aby ste si mohli počúvať obľúbenú hudbu a užívať masáž súčasne.
- Modré LED podsvietenie na každej bočnici

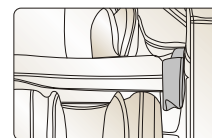

Vrečko na mobil




3D digita audio




LED modré podsvietenie

Inštalácia bočných častí

- Vyhľadajte konektory zodpovedajúce montovanej strane v zadnej časti rámu a vysunúte ich cez štvorcový otvor v ráme kresla. (obrázok 1)
- Keď vysuniete všetky zodpovedajúce káble a vzduchové hadičky, zapojte ich s koncovkami na opierke podľa farebného označenia (obrázok 2)

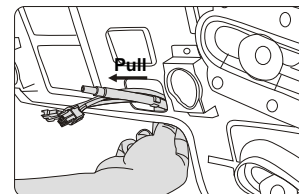


(Obrázok 1)

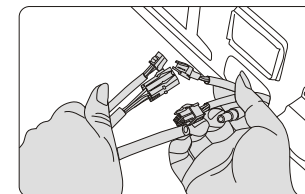


(Obrázok 2)

- Vytiahnuté koncovky zapojte do zodpovedajúcich koncoviek na bočnici a vzduchové hadičky zapojte do seba podľa farebného označenia (obrázok 3)
- Po správnom zapojení všetkých konektorov ich opatrne vložte späť otvorom do kresla na bočnej časti rámu, buďte opatrní aby sa konektory nerozpojili (obrázok 4)

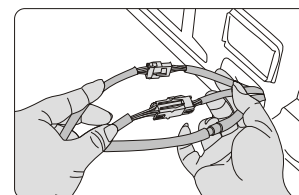


(Obrázok 3)

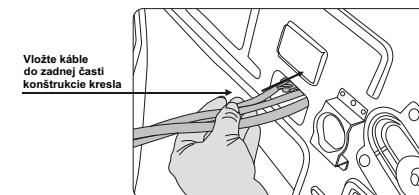


Vložte káble do zadnej časti konštrukcie kresla

(Obrázok 4)

- Ako je zobrazené, kolíky na opierke zapadajú do otvorov v kovovej konštrukcii kresla (obrázok 5)
- Rukami pridržiajte bočnú časť kresla, predný kolík pasuje do predného otvoru a zadný kolík pasuje do zadného otvoru v ráme (skontrolujte prepojenú kabeláž aby bola vložená správne do otvoru v ráme kresla, predídete tým poškodeniu), celá bočnica musí zapadnúť do rámu kresla (obrázok 6)

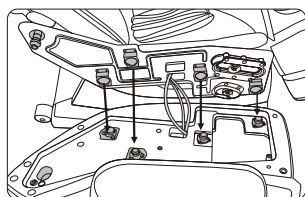


(Obrázok 5)

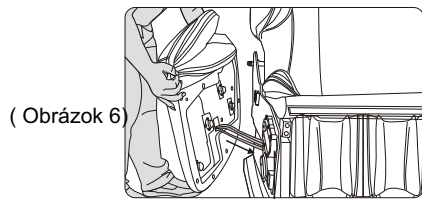


(Obrázok 6)

Pozor: kabeláž musí byť vložená na správne miesto, aby sa predišlo poškodeniu

- Bočnica zapasovala a prekryla rám kresla, mierne zatlačte na bočnicu a presvedčte sa, že kolíky správne zapasovali do otvorov v ráme kresla tak, aby bočnica nemala vôľu. (obrázok 7)
- Nájdite inštalačný otvor v prednej časti kovového rámu a pripevnite bočnicu dodávanou skrutkou s imbusovou hlaviciou. (obrázok 8)
- Nájdite inštalačný otvor v zadnej časti kovového rámu a pripevnite bočnicu dodávanou skrutkou s imbusovou hlaviciou. Rovnaký postup použite pri inštalácii druhej bočnice (obrázok 9)

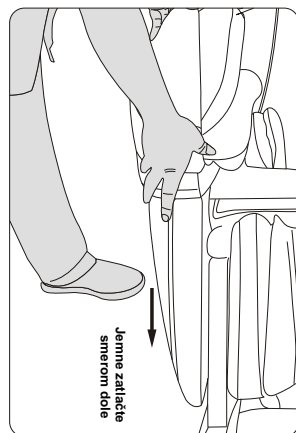


(obrázok 7)

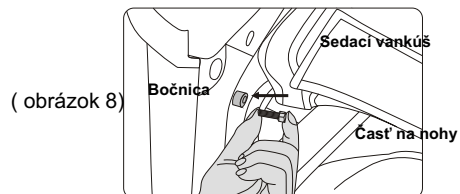

(obrázok 8)

Sedací vankúš
Bočnica
Časť na nohy

Zobrazenie: umiestnenie skrutky v prednej časti rámu

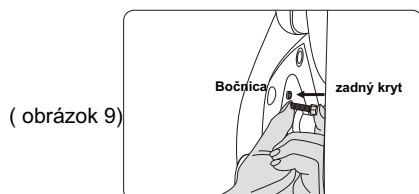


(obrázok 9)


Bočnica
zadný kryt

Zobrazenie: umiestnenie skrutky v zadnej časti rámu


Inštalácia držiaku ovládača

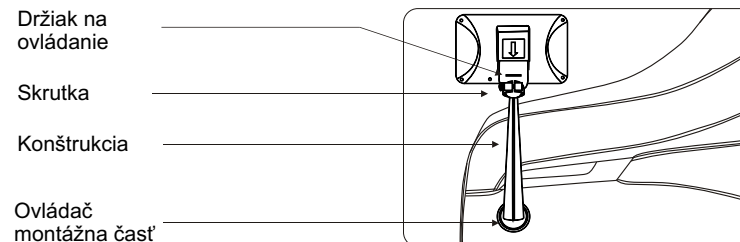

- Vymontujte skrutku na ráme držiaka (obrázok 1)
- Vložte guľový kĺb do otvoru na ráme držiaka (obrázok 2)

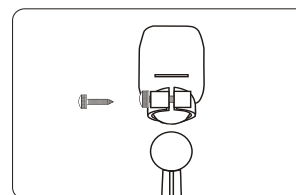


(Obrázok 1)

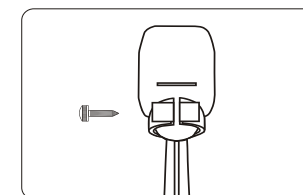


(Obrázok 2)

- Zaskrutkujte späť skrutku čo ste vymontovali (krok 1) a utiahnite ju, pozor aby smerovala ako na obrázku. (obrázok 3)
- Nachystajte rúčku držiaka na inštalačný otvor v kresle (obrázok 4)

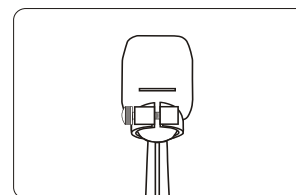


(obrázok 3)

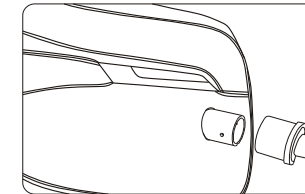


(obrázok 4)

- Nainštalujte držiak na ovládanie a utiahnite ho (obrázok 3)
- Uťahnite imbusovú skrutku na držiaku (obrázok 4)

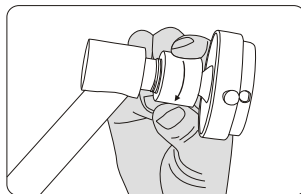


(obrázok 3)

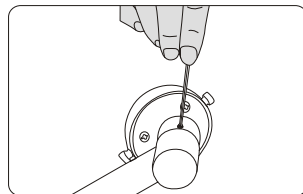


(obrázok 4)

- Nastavte rameno držiaku na otvory v mieste na bočnici (obrázok 5)
- Zasuňte držiak na miesto inštalácie (obrázok 6)

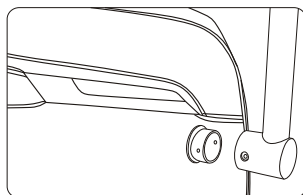


(obrázok 5)

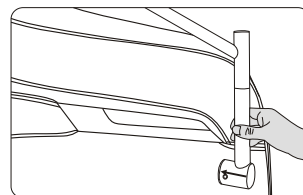


(obrázok 6)

- Nastavte otvory na ramene držiaku a priskrutkujte skrutky (obrázok 7)
- Zafixujte všetky skrutky držiaku (obrázok 8)

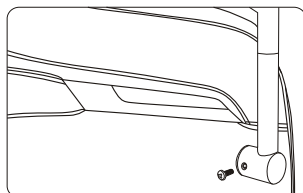


(obrázok 7)

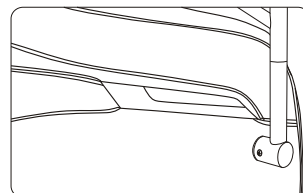


(obrázok8)

- Zatlačte poistky na boku držiaka (obrázok 9)
- Uistite sa, že poistky zapasujú do rámu na ovládanie (obrázok 10)

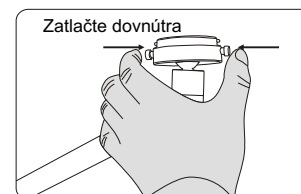


(obrázok 9)

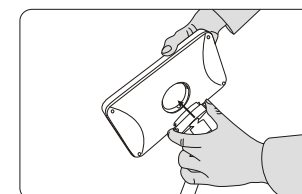


(obrázok10)

- Pustite poistky na boku držiaka a otočte rámom pokým sa nezaklikne (obrázok 11)
- Uistite sa, že poistky zapasujú do rámu na ovládanie (obrázok 12)

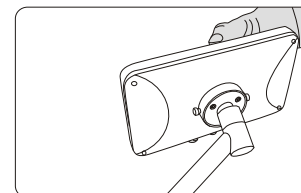


(obrázok 11)

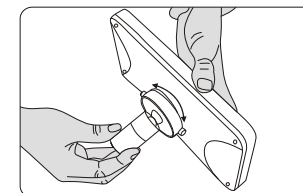


(obrázok 12)

- Rám držiaka sa dá po inštalácii otáčať o 360° (obrázok 13)
- Rám môžete nakláňať doľava a doprava a nakláňať hore a dole (obrázok 14)

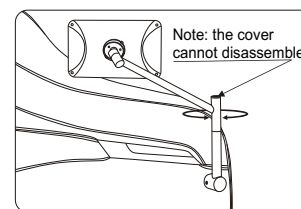

(obrázok 13)

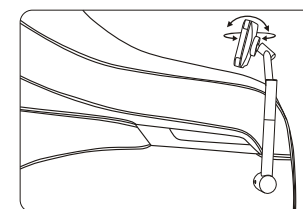


(obrázok 14)


Upozornenie:

Zobrazené možnosti uchytenia a montáže ovládania sú voliteľné a môžu záležať na konkrétnom modeli kresla a na výbave



montáž a uchytenie rámu na ovládanie

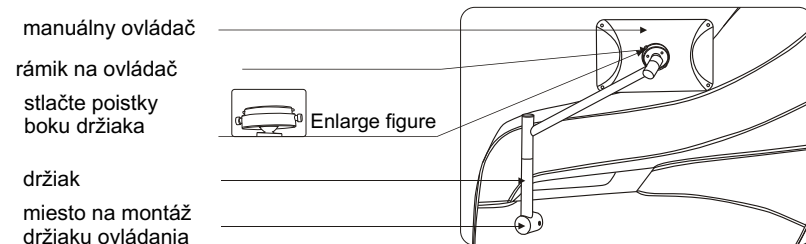

Príprava pred inštaláciou



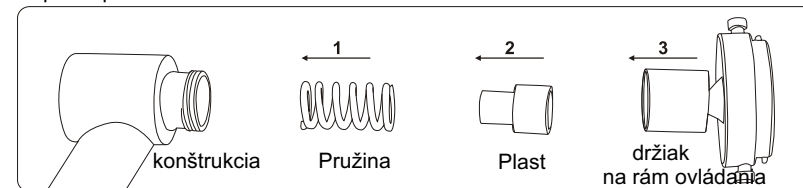


- Vložte pružinu do konštrukcie ramena (obrázok 1)
- vložte plastový diel (obrázok 2)

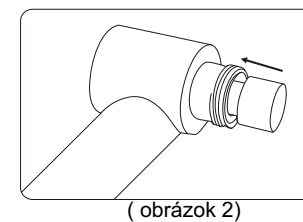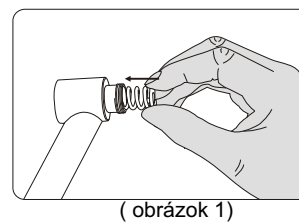


Inštalácia ovládania a použitie

- Vložte káblový ovládač do rámiku na držíaku (obrázok 1), rám môžete hýbať vľavo/vpravo. (obrázok 2) a držíak môžete horizontálne polohovať

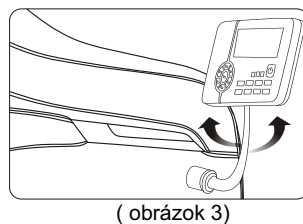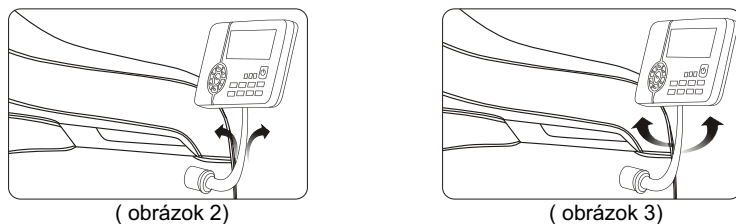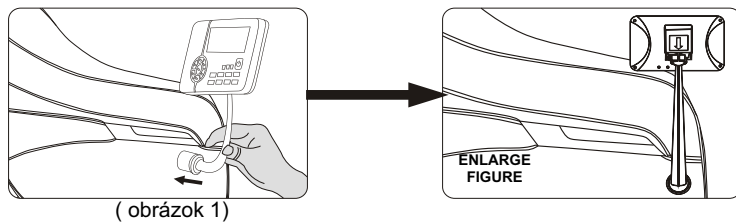


Demontáž a použitie vankúša a chrbtovej opierky

Používanie vankúšov môže zmierniť intenzitu tlaku masážnych hlavíc, záleží na Vašom rozhodnutí, či vankúš (opierku) budete využívať, alebo nie. (odporúčané je používať). Vankúš a opierka sa uchyťávajú o kreslo zipsom (obrázok 1), vankúš s opierkou je spojený suchým zipsom (2)

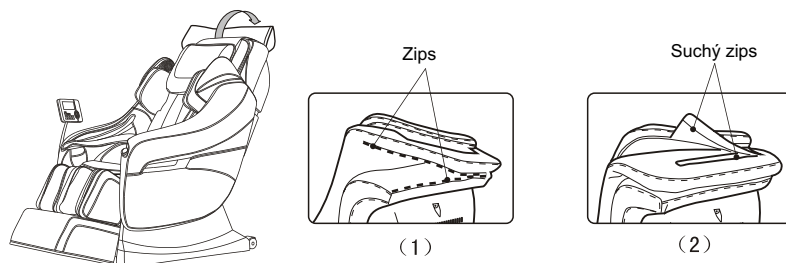

Ochrana podlahy


Položenie a dlhodobé používanie ťažkého masážneho kresla môže spôsobiť na podlahe otlačenie alebo poškodenie, odporúčame podložiť kreslo kobercom alebo podložkou.

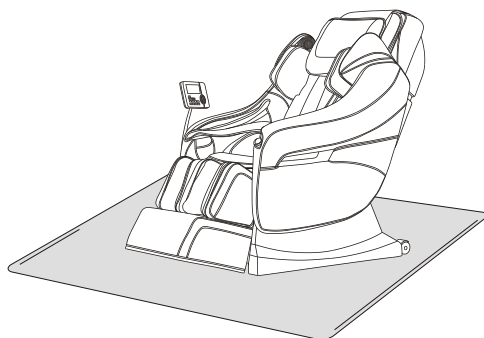

UPOZORNENIE: Neposúvajte kreslo tlačení alebo pomocou koliesok po drevenej podlahe a dlažbe. Na manipuláciu sa odporúčajú 2 osoby. Počas zdvíhania použite len pevné spodné časti, prosím nedržte za bočnice a za sklápacia časť na nohy.

Spôsob presúvania

Odpojte všetku kabeláž a zabezpečte ovládač. Nakloňte kreslo do takého uhlu až sa dostane na kolieska a rozdelí sa rovnováha. Teraz môžete posunúť kreslo vpred/vzad. Nepoužívajte na krivom povrchu a na povrchu náchylnom na opotrebenie. Pozor aby ste nepoškodili kabeláž napájania a ovládania!

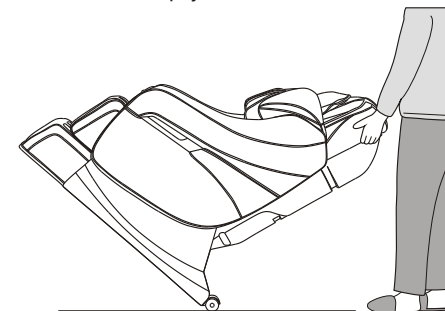

Špecifikácia

Model: A60
Popis: Celotelové masážne kreslo
Konfigurácia: 01
Napájanie: 110-120V~ 60Hz ☐
220-240V~ 50Hz / 60Hz ☒
Spotreba: 200W
Pracovný čas masáže: 20 minút
Bezpečnostná trieda: Trieda 1

www.masaznekresla.com

www.masaznekresla.sk

Damico s.r.o. Zlievarenská 1, 91702 Trnava